



ACS · ACJ Analysewaage

Der Bestseller unter den Analysenwaagen, mit hochwertigem Single-Cell Wiegesystem, optional mit Eichung

Merkmale

- KERN ACJ: Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen $\geq 2^\circ\text{C}$ und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- KERN ACS: Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe *Prüfgewichte*
- Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
- Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt

- Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage
- Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt
- ■ Datenschnittstellen RS-232 und USB zum Übertragen von Wägedaten an PC, Tablet oder Drucker
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten




Technische Daten

- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 14 mm
- Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, $\varnothing 91\text{ mm}$
- Wägeraum B×T×H 174×162×227 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 213×333×338 mm
- Nettogewicht ca. 7 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich $10^\circ\text{C}/30^\circ\text{C}$

■ Single-Cell Spitzentechnologie:

- Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück
- Stabiles Temperatur-Verhalten
- Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 s unter Laborbedingungen
- Hohe mechanische Robustheit
- Hohe Eckenlastsicherheit

STANDARD

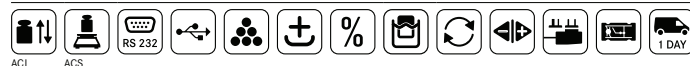

OPTION



FACTORY



Modell	Wägebereich [Max] g	Ablesbarkeit [d] mg	Eichwert [e] mg	Mindestlast [Min] mg	Reproduzier- barkeit mg	Linearität mg	Optionen	
							Eichung	Kalibrierschein
KERN							MT KERN	DAKKS-akk. KERN
ACS 80-4	82	0,1	-	-	0,2	$\pm 0,3$	-	963-101
ACS 100-4	120	0,1	-	-	0,2	$\pm 0,3$	-	963-101
ACS 200-4	220	0,1	-	-	0,2	$\pm 0,3$	-	963-101
ACS 300-4	320	0,1	-	-	0,2	$\pm 0,3$	-	963-101
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) bitte gleich mitbestellen. Eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.								
ACJ 80-4M	82	0,1	1	10	0,2	$\pm 0,3$	965-201	963-101
ACJ 100-4M	120	0,1	1	10	0,2	$\pm 0,3$	965-201	963-101
ACJ 200-4M	220	0,1	1	10	0,2	$\pm 0,3$	965-201	963-101
ACJ 300-4M	320	0,1	1	10	0,2	$\pm 0,3$	965-201	963-101

BATSCH WAAGEN & EDV GmbH

Kontakt: Sabine Willimaier, Medizinalwaagen und Präzisionswaagen

A-3382 Loosdorf, Wachaustr. 61, T: +43 (0) 27 54 / 70 00-51, E: s.willimaier@batsch.at, www.batsch.at

Wir sind zertifiziert nach ISO 9001:2015, Kooperationspartner der ermächtigten Eichstelle bvfs und eine Außenstelle des Kalibrierdienst ÖKD 18.